

VINTAGE



ESTETICA VERDADERA



RESTAURACIONES SIN METAL



Visitenos www.shofu.com o llámenos al +1 760 736-3277



Akinobu Ogata, Laboratorio Dental Ultimate Styles

ESTRUCTURAS DE OXIDO DE ZIRCONIO FABRICADAS EN CAD/CAM

Lograr restauraciones libres de metal estéticamente naturales utilizando cualquier estructura de óxido de zirconio, es una tendencia que está creciendo.

Vintage ZR es una porcelana de alta fusión de micro leucite sobre una base feldespática, reduce el potencial de fracturas.

Vintage ZR ha sido elaborada específicamente para óxido de zirconio.

La combinación de Vintage ZR con estructuras de zirconia, ofrece posibilidades ilimitadas en la construcción estética de puentes y coronas.


Vintage ZR ofrece una reproducción natural del color, incluso en capas delgadas, debido a la estructura de partículas finas y homogéneas.

TECNOLOGIA E INNOVACION


COLORES IDENTICOS Y NATURALES

Vintage ZR ha desarrollado específicamente liners opacos para realzar la unión a la estructura y para obtener el color deseado del diente, incluso en capas delgadas. (Ver el gráfico de capas abajo).

Vintage ZR ofrece colores gingivales con diferentes opciones para casos estéticamente complejos de implantes.

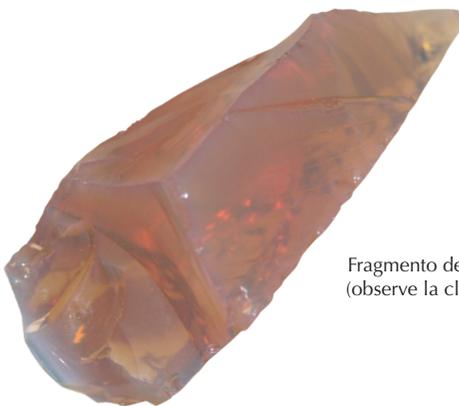

Fragmento de ópalo (observe la claridad)

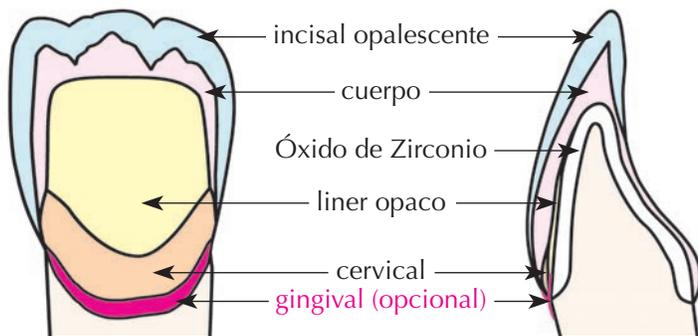

Akinobu Ogata, Laboratorio Dental Ultimate Styles

ESTETICA NATURAL

Vintage ZR utiliza una estructura de micro partículas finas para las porcelanas incisales opalescentes y las porcelanas translúcidas, la cual imitan las características ópticas de la luz en dientes naturales.

La porcelana Vintage ZR altera la apariencia dependiendo de las condiciones de cambios en la luz, logrando un efecto natural.



Akinobu Ogata, Laboratorio Dental Ultimate Styles



Peter Pizzi, MDT



Peter Pizzi, MDT

VINTAGE ZR – DISEÑADA PARA SER LIBRE DE PREOCUPACIONES!

- ZR** es una cerámica feldespática, desarrollada específicamente para estructuras de Zirconia
- ZR** tiene una gran resistencia y no desarrolla fracturas como las porcelanas modificadas de vidrio
- ZR** es fácil de manipular
- ZR** se adapta perfectamente con cualquier estructura de Zirconia
- ZR** no presenta matices grisosos como otras porcelanas de Zirconia
- ZR** permite cementación convencional y tiene una biocompatibilidad extraordinaria
- ZR** tiene un solo ciclo de cocción, para ambas porcelanas libre de metal, Vintage AL y Vintage ZR, excepto el ciclo de cocción para margen



Creada, desarrollada y fabricada exclusivamente por Shofu, los creadores de porcelana dental fina desde 1922.



VINTAGE ZR



AB SET / KIT AB (PN 9000)

Una introducción económica del sistema Vintage ZR. Técnica con colores A y B



CD SET / KIT CD (9001)

Un complemento práctico para el sistema Vintage ZR Kit AB



WHITENING SET / KIT DE BLANQUEAMIENTO (PN 9002)

Más blancos que los colores dentales clásicos



ENAMEL EFFECT SET / KIT DE EFECTOS INCISALES (PN 9003)

Efectos individuales para el área incisal usando porcelanas de efecto opalescente y translúcida



MARGIN PORCELAIN SET / KIT DE PORCELANA PARA MARGEN (PN 9004)

Proporciona márgenes estéticas



COLOR EFFECT SET / KIT EFECTO DE COLOR (PN 9005)

Efectos naturales para individualizar porcelanas de cuerpo y cervical



INTRO SET / KIT DE INTRODUCCION (PN 9006)

Ideal para familiarizarse con las posibilidades estéticas que ofrece el sistema de porcelana Vintage ZR

RESUMEN TECNICO

Inclusive después de varias cocciones, Vintage ZR muestra una expansión uniforme y fijación segura a la estructura de óxido de Zirconia.

		Coeficiencia de Expansión Térmica (25 ~ 500°C)	Punto de Transformación de Vidrio
Liner Opaco	2 / 4 Cocción	$9,3 \times 10^{-6}K^{-1}$	620°C
Margen	2 / 4 Cocción	$9,3 \times 10^{-6}K^{-1}$	635°C
Cuerpo	2 / 4 Cocción	$9,4 \times 10^{-6}K^{-1}$	605°C
Cervical Trans.	2 / 4 Cocción	$9,4 \times 10^{-6}K^{-1}$	595°C
Corrección	2 / 4 Cocción	$9,4 \times 10^{-6}K^{-1}$	585°C



SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan (www.shofu.co.jp)
SHOFU INC. Singapore Branch 10 Science Park Road, #03-12 The Alpha, Science Park II, Singapore 117684 (www.shofu.com.sg)
SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China (www.shofu.com.cn)
SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, CA 92078-4059, USA (www.shofu.com)
SHOFU UK Riverside House, River Lawn Road, Tonbridge, Kent, TN9 1EP, UK (www.shofu.co.uk)
SHOFU DENTAL GmbH Am Brühl 17, 40878 Ratingen, Germany (www.shofu.de)

SHOFU is a registered trademark of SHOFU INC. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders. SHOFU INC. reserves the right to change specifications without notice.
 © Copyright 2012 SHOFU INC. All rights reserved.